

Menschen retten in Klinik-/ Pflegebetten

Rettungs-Zubehör Rhomb-Care® Semy Plus Evakuierungsbezug




Mit dem Rhomb-Care® Evakuierungsbezug können bereits vorhandene Matratzen auf einfache Weise zur Rettungsmatratzen nachgerüstet werden. Im Evakuierungsfall ermöglicht der Bezug eine schnellstmögliche Rettung von immobilen Menschen aus dem Gefahrenbereich nur durch einen Helfer. Damit entfällt das aufwendige Umlagern auf Tragen oder Tragetücher.

Die blaue Oberseite des Bezuges ist aus PU-beschichtetem, atmungsaktiven Material gefertigt. Die schwarze Unterseite besteht aus strapazierfähigem und gleitfähigem Polyester-gewebe. Längsseitlich ist der Bezug mit Gurten versehen, die im Ernstfall zur Fixierung des Patienten / Bewohners mit Hilfe von Klettverschlüssen dienen. Am Kopf- und Fußende befinden sich Griff- bzw. Transportschlaufen. Alle Gurte und Schlaufen sind während des Nichtgebrauchs mit Klettverschlüssen engangliegend am Bezug gesichert.


Größe in cm	Art.Nr.	Größe in cm	Art.Nr.
90 x 200 x 14	57.048	100 x 200 x 14	57.051
90 x 200 x 15	57.248	100 x 200 x 15	57.251




1. Die Arme des Bewohners / Patienten unter die Bettdecke platzieren. Anschließend den Bewohner/Patienten mit den seitlichen Sicherungsgurten mit Hilfe der Klettverschlüsse auf der Matratzen fixieren.

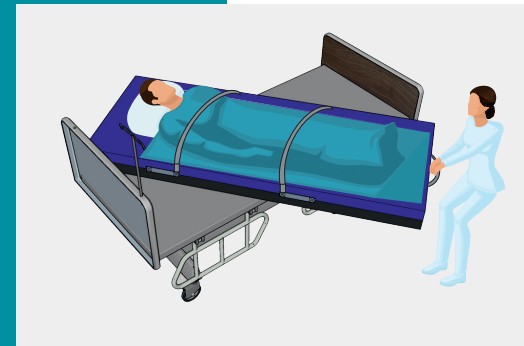

2. Matratze an der Zugschleife am Fußende aus dem Bett ziehen. Um Panik zu vermeiden, bitte unbedingt Blickkontakt zum Bewohner / Patienten halten und die Vorgehensweise klar und deutlich erläutern. Alternativ kann auch die Zugschleife am Kopfende verwendet werden. Dies ist besonders bei Bewohnern / Patienten mit Kopf- oder Nackenproblemen empfehlenswert.

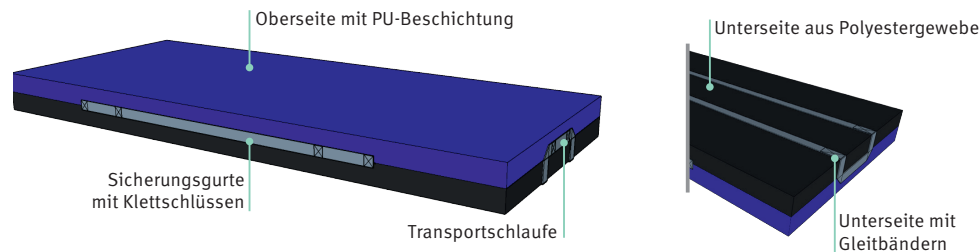

Eigenschaften des Matratzenbezuges

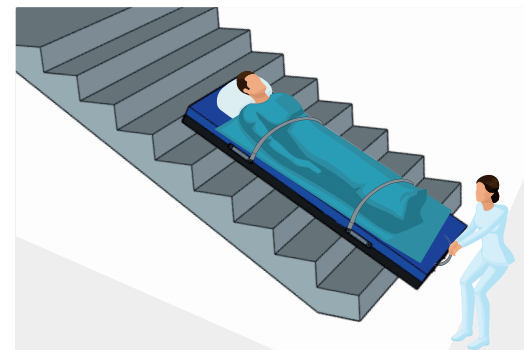

3. Bewohner / Patienten zügig über Flure und Treppen evakuieren und aus dem Gefahrenbereich bringen. Die Evakuierung kann alleine oder zu zweit erfolgen.